



ORVOSTECHNIKA

Urit -5500

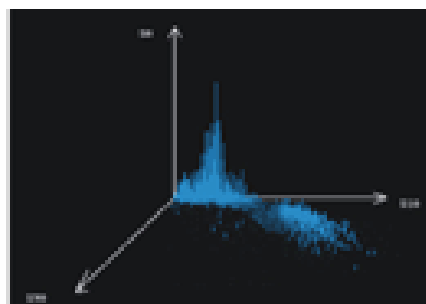

HAEMATOLÓGIAI AUTOMATA 5 part Diff.

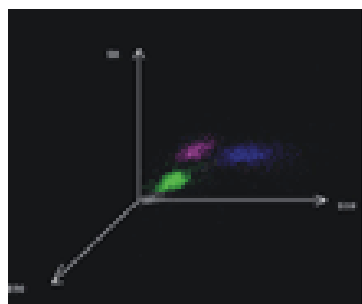

Termékleírás

Teljesen automatikus hematológia analizátor, számol limfocitát, monocytát, neutrofil, eosinophil és basophil sejteket a WOC csatornában . Minőségi alkatrészek és kompakt , megbízható tervezés. Két mérő kapillárisal való analízis.

Paraméterek:


WBC, LY#, MONO#, EOS#, GRAN#, LY%, MONO%, EOS%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, 5 part Diff. limfocitát, monocytát, neutrofil, eosinophil és basophil sejtek a WOC csatornában

Mérési elv:

Laser fénnel történő multi-dimenzionális részecskeanalízis.
WBC- analízis dupla mód (Impedancia Optical mérés).
RBC mód, ellanállás mérés.
Sample rotatory szelepmennyiségi meghatározás technika
110 mintára egy óra alatt.
"Walk-away" automatizálás, magas hatékonyság és pontosság.
WBC 5 diff saját reagenssel.


Hélium-neon lézert fény szóródás

URIT-5500 hélium-neont lézert használ az áramlás cytometria rendszerében. A különböző szóródási szögek számításain keresztül végzi a részecskék elemzéseit. Köztük a részecskék méretét, alakú sajátosságát, valamint előfordulásának számát.

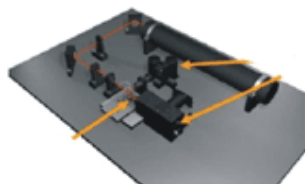

Egy csatorna komplett WBC differenciálást végez.

URIT-5500 számol limfocitát, monocytát, neutrofil, eosinophil és basophil sejteket a WOC csatornában

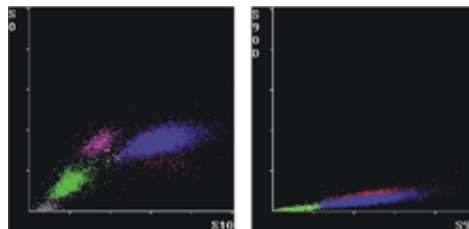

Vérvételi szelep

Sample Rotatory szelep (SRV)

Magas pontosság
Könnyű karbantartás
A vérérzékelő figyelmeztet a felszívást.



Forgalmazó:

OrvosTechnika Kft.

1202 Budapest, Nagykőrösi út 187.

Fax: 061 286 40 50

Tel: 061 285 46 15, 06 30 9426 222

www.orstotechnika.eu

kaltenecker@orstotechnik.eu